

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

RADIOFREQUENZA

 Manuale di utilizzo

RF BEAUTY MINI



CE

EGREGIO CLIENTE

**LA RINGRAZIAMO PER LA SCELTA EFFETTUATA E LE CONFERMIAMO LA NOSTRA PIU'
COMPLETA DISPONIBILITA' PER QUALSIASI AIUTO O SUGGERIMENTO DI CUI AVESSE
BISOGNO**

 **“Deess”**
Shenzhen
Guangdong, China, 518101

e distribuiti da:

Domino S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codognè (Treviso) ITALY
Tel 0438.7933 Fax 0438.793363
info@globusitalia.com
www.globuscorporation.com

INDICE

CARATTERISTICHE TECNICHE	4
DOTAZIONE.....	4
DESTINAZIONE D'USO	5
CONNESSIONI.....	5
ETICHETTATURA E SIMBOLI	6
Dispositivo	6
Interfaccia e comandi	7
Display.....	7
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI	8
Comportamento obbligatorio	8
Avvertenze prima dell'uso	8
Avvertenze durante l'uso.....	8
Effetti indesiderati	8
Controindicazioni	9
MANUTENZIONE E PULIZIA.....	9
Dispositivo e accessori.....	9
Trasporto	10
Smaltimento	10
MODO D'USO	10
Accensione/ Spegnimento del dispositivo	10
Come eseguire il trattamento passo dopo passo	13
CONDIZIONI DI GARANZIA	15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo

Frequenza:	1.15+0.1MHz
Grado di protezione:	IP 20
Dimensione:	15,5 x 5,5 x 2,5 cm
Peso:	500 g
Potenza:	24 W
Modalità:	resistivo

Condizioni di utilizzo

Temperatura :	da +5°C ~ +40°C
Umidità relativa massima:	80%
Pressione atmosferica:	da 860 hPa a 1060 hPa

Alimentatore:

Model : KA2401A-1202000EU


INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.65A Max

OUTPUT: 12.0V 2.0A 24.0W

Polarità: 

Crema conduttiva viso all'acido ialuronico Globus 50 ml

DOTAZIONE

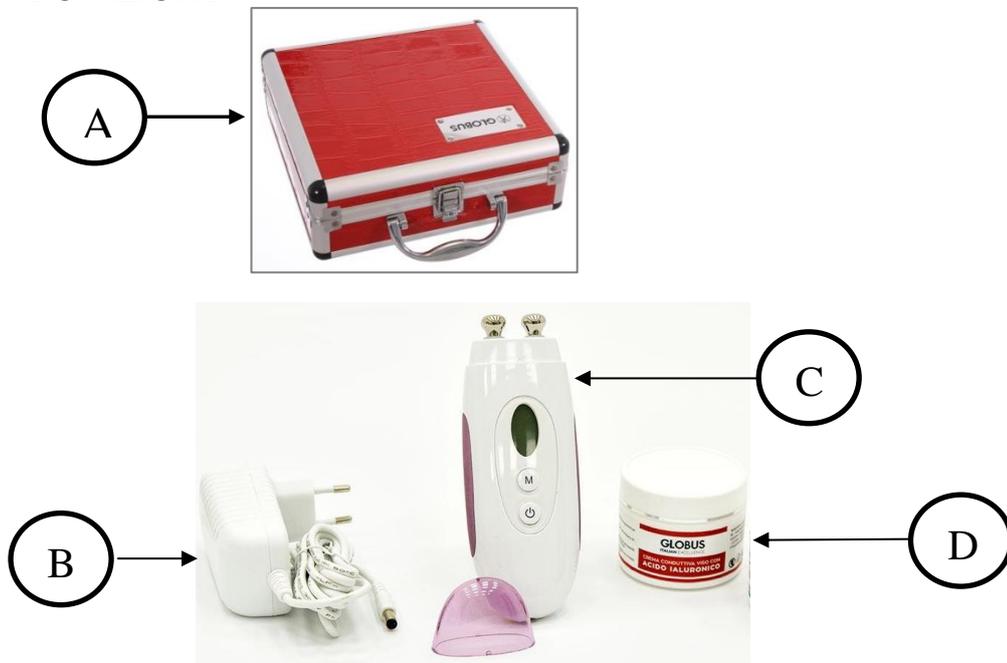

A- Valigetta per il trasporto

B- Alimentatore

C- Dispositivo

D- Barattolo di crema conduttiva viso all'acido ialuronico da 50 ml

Una volta aperto l'imballaggio, verificare che la dotazione di base sia completa. Qualora dovesse mancare qualche elemento contattare immediatamente il rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l'acquisto. Controllare a vista l'integrità dell'apparecchio e degli accessori. Le immagini sono a titolo puramente dimostrativo. Il produttore si riserva di poter modificare tutte le informazioni fornite senza preavviso.

DESTINAZIONE D'USO

La vita utile stimata del prodotto è di anni 5. Si consiglia il rientro del prodotto presso il fabbricante e/o centro autorizzato ogni 2 anni per la manutenzione e verifica di sicurezza.

I dispositivi Rf beauty mini sono stati studiati per essere utilizzati in ambiti operativi quali:

- ambienti domiciliari;
- per uso estetico personale opportunamente informati delle metodologie usate dall'apparato.

CONNESSIONI

Dispositivo

Il dispositivo "Rf beauty mini" funziona collegato alla rete elettrica. Per collegare l'alimentatore al connettore inserire la presa nell'entrata A. Vedi figura (sotto).

Inserire prima il connettore nel dispositivo e poi collegarlo alla rete elettrica.



ETICHETTATURA E SIMBOLI

	<p>Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Simbolo di riciclaggio.</p> <p>Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.</p>
	<p>Indica che il dispositivo è di classe II</p>
	<p>Questo simbolo sul vostro apparecchio serve ad indicare che è in conformità con i requisiti delle direttive vigenti</p>
	<p>Indica che il prodotto è realizzato nel rispetto della direttiva 2011/65/UE</p>
	<p>Informa l'operatore che prima dell'uso dell'apparato è obbligatorio la lettura del manuale</p>
	<p>Fa riferimento al fabbricante</p>

Dispositivo


Shenzhen GSD Tech Co., Ltd
 Building A,
 Junsida Technology Park,
 Jin'an Road, South Ring of GuangMing Town,
 GuangMing New District, Shenzhen, China

AC/DC ADAPTER
 Model:KA2401A-1202000EU
 Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.65A Max
 Output: 12.0V 2.0A 24.0W

GLOBUS







Model: **RF BEAUTY MINI**
DOMINO S.R.L.
 Via Vittorio Veneto, 52
 31013 Codognè (TV) - ITALY



Interfaccia e comandi

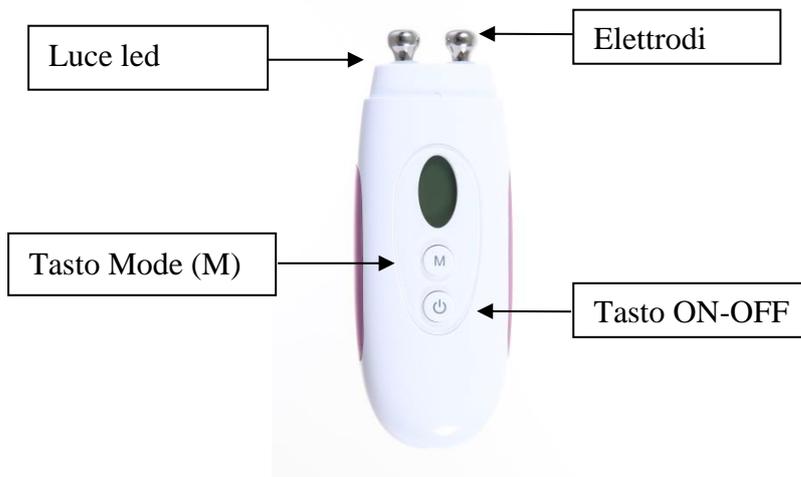

Display

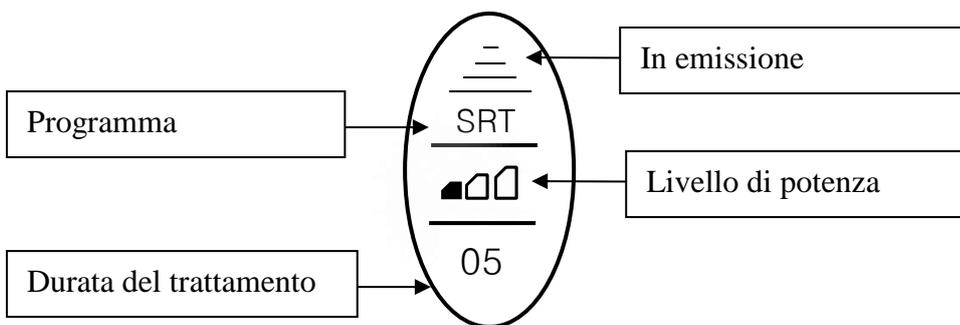

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI

Comportamento obbligatorio

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l'utente deve utilizzare l'apparecchio nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d'uso.

Il produttore declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto indicato e prescritto nel presente manuale.

Senza il permesso scritto del produttore sono vietati la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto contenute in questo manuale.

Se l'involucro, il cavo o il connettore dell'alimentatore presentano segni di usura o danneggiamento provvedere alla sostituzione immediata dello stesso.

L'apparato va collegato alla linea elettrica attraverso il proprio alimentatore, prima di eseguire tale operazione verificare che l'impianto sia conforme alle direttive vigenti nel proprio Paese. Non collocare l'alimentatore in modo che risulti difficile scollegarlo dalla presa di alimentazione.

Non è ammessa alcuna modifica del dispositivo.

Avvertenze prima dell'uso

Si sconsiglia l'uso dell'apparecchio in concomitanza con altri apparati elettronici, in modo particolare con quelli che vengono impiegati per il sostentamento di funzioni vitali. Nel caso in cui sia necessario l'uso del dispositivo vicino o sovrapposto ad altri apparecchi va osservato il funzionamento.

- E' buona norma leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'unità; conservate con cura il presente libretto.
- Prima di ogni utilizzo controllate sempre l'integrità dell'apparecchio, condizione indispensabile per l'effettuazione del trattamento; non utilizzate l'unità se presenta difettosità o malfunzionamenti dei cavi o dei tasti.
- Non utilizzare agenti infiammabili durante l'applicazione del dispositivo.

Il dispositivo dev'essere tenuto fuori della portata dei bambini.

Avvertenze durante l'uso

Durante l'utilizzo della Rf Beauty mini bisogna assicurarsi di:

- togliere eventuali lenti a contatto;
- utilizzare sempre la crema conduttiva, non utilizzare sulla pelle asciutta;
- regolare la potenza di emissione in relazione alla tolleranza individuale al calore.

Effetti indesiderati

- Arrossamento
- Irritazione cutanea

Controindicazioni

L'uso del dispositivo è controindicato:

- in pazienti portatori di pace- maker e di altre apparecchiature elettroniche impiantabili;
- non effettuare trattamenti negli occhi;
- non effettuare in presenza di disturbi al sistema cardiocircolatorio, alla tiroide e alla pelle;
- non effettuare durante lo stato di gravidanza;
- non effettuare in presenza di cancro alla pelle o glaucomi;
- non effettuare durante terapie farmacologiche ormonali;
- non effettuare su pelli che hanno subito severe bruciateure o su cicatrici ipertrofiche.

Evitare nel modo più assoluto di effettuare trattamenti su superfici insensibili al calore e in presenza di una delle seguenti malattie:

- emorragie;
- infezioni locali o sistemiche;
- patologie dermatologiche attive;
- febbre;
- alterazioni della coagulazione;
- malattie infiammatorie in fase acuta.

Qualora fossero state effettuate delle iniezioni di fillers (tipo botulino, acido ialuronico e/o altri), si raccomanda di utilizzare il dispositivo su quelle parti solo dopo un tempo di 3-6 mesi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Dispositivo e accessori

- In caso di guasto reale o presunto non manomettere il dispositivo o tentare di ripararlo in proprio.

Non intervenire sul dispositivo, non aprirlo. Le riparazioni possono essere effettuate solo da un centro specializzato ed autorizzato.

- Evitare urti violenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio e determinare malfunzionamenti anche non immediatamente riscontrabili.
- Il dispositivo va utilizzato in un ambiente asciutto e libero in aria (non avvolto da altri oggetti).
- Pulire il dispositivo e gli accessori solo con Amuchina o sali d'ammonio di quaternario diluiti in acqua distillata in percentuale pari al 0,2-0,3%. Prestare attenzione a rimuovere ogni residuo di crema dalla piastra e dagli elettrodi mobili. Al termine della pulizia/disinfezione il dispositivo e i suoi accessori vanno perfettamente asciugati con l'uso di un panno pulito.
- Utilizzare il dispositivo e gli accessori sempre con le mani adeguatamente pulite.

- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente pulito, onde evitare la contaminazione del dispositivo stesso e degli accessori con polveri e sporco.
- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente ventilato, dove avvengono ricambi periodici dell'aria.
- Si prevede che il processo di pulizia/disinfezione degli elettrodi avvenga ad ogni fine utilizzo. Per quanto riguarda le altre parti che potrebbero venire a contatto con il soggetto trattato si consiglia di pulirle all'occorrenza e comunque almeno una volta alla settimana.
- Il prodotto ed i suoi accessori, quando non utilizzati e/o quando trasportati vanno riposti nella loro confezione originaria.

Trasporto

Al termine dell'utilizzo o durante il trasporto il dispositivo ed i suoi accessori vanno riposti all'interno della valigetta originale e disposti come all'origine.

Smaltimento


Non gettare l'apparecchio o sue parti nel fuoco, ma smaltire il prodotto nei centri specializzati e comunque nel rispetto delle normative in vigore nel proprio Paese. Si informa l'utilizzatore che può riconsegnare il prodotto a fine vita al distributore all'atto di acquisto di una nuova apparecchiatura.

MODO D'USO

Accensione/ Spegnimento del dispositivo

- Inserire il connettore dell'alimentatore nell'apposito alloggiamento del dispositivo.
- Premere per qualche secondo il tasto ON-OFF. Il display si illuminerà ed un bip sonoro confermerà l'avvenuta accensione.

Per spegnere il dispositivo tenere premuto il tasto ON-OFF.

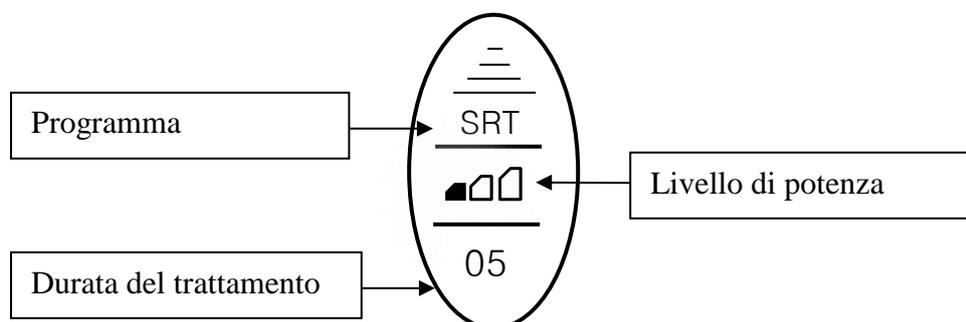

Tenendo premuto a lungo il tasto Mode (M) è possibile selezionare uno dei tre menu:

- Programma
- Livello di potenza
- Durata del trattamento

Una volta selezionato il menu è possibile modificare la selezione premendo velocemente il tasto Mode (M).

Per **scegliere un programma**, quindi, sarà necessario premere a lungo il tasto Mode (M) fino a quando sarà selezionata SRT, quindi tramite delle pressioni più veloci dello stesso tasto sarà possibile scegliere tra i seguenti programmi:

Programma	Tecnologia
SRT (ringiovanimento pelle e contorno occhi)	Radiofrequenza
WR (riduzione rughe)	Radiofrequenza + luce LED rossa
SR (ringiovanimento)	Radiofrequenza + luce LED gialla

Il LED (Light emitting diode) agisce con uno stimolo luminoso modulando e stimolando la sintesi del collagene, che rappresenta una sorta di impalcatura della cute. Ogni lunghezza d'onda viene assorbita da specifici cromofori a diverse profondità, permettendo di eseguire un gran numero di trattamenti. L'esposizione al LED giallo (590nm) favorisce la rigenerazione cutanea, migliora la funzione immunitaria, accelera la circolazione sanguigna, ripara efficacemente i segni rossi, le macchie rosse, allevia eventuali gonfiori. L'esposizione alla luce LED rossa (635 nm) aumenta l'elasticità della pelle e stimola la rigenerazione del collagene.

Per **regolare la potenza di emissione** sarà necessario premere a lungo il tasto M fino a quando sarà selezionato il grafico del livello di potenza. Tramite delle pressioni più brevi dello stesso tasto sarà possibile impostare il livello di energia desiderato. Consigliamo di iniziare con il livello 1 e poi eventualmente aumentare.

Per **regolare la durata del trattamento** sarà necessario premere a lungo il tasto M fino a selezionare la durata del trattamento. Effettuare delle pressioni più brevi per impostare un tempo diverso (5, 10 oppure 15 minuti).

Una volta scelte le impostazioni avviare il programma tramite una breve pressione del tasto ON-OFF. L'indicatore di emissione inizierà a lavorare e si accenderà la luce led (nei programmi WR e SR).

Per mettere in Pausa il dispositivo premere brevemente il tasto ON-OFF.

Consiglio per l'utilizzo

Un trattamento sull'intero viso (inclusi zigomi, contorno occhi, fronte e collo) può richiedere tra i 15 e i 25 minuti:



- a. Rimuovere il trucco e lavare la pelle di viso e collo - 5 minuti
- b. Asciugare bene la pelle e applicare la crema per il trattamento -1 minuto

- c. Eseguire il trattamento desiderato per un tempo totale compreso tra i 5 e i 15 minuti
- d. Ripulire la pelle e applicare una crema idratante – 3 minuti

Importante: applicare una quantità abbondante di crema prima di eseguire il trattamento e applicare nuovamente se necessario durante il trattamento stesso. Al fine di evitare possibili scottature, non utilizzare mai Globus RF Beauty Mini senza crema.

Come eseguire il trattamento passo dopo passo

Far scorrere lentamente le testine di Globus RF Beauty Mini sulla pelle. E' possibile che si avverta una sensazione di calore in profondità. Più lento sarà il movimento delle testine sulla pelle, maggiore sarà il calore che si avvertirà. Assicurarsi che entrambe le testine siano sempre a stretto contatto con la pelle durante tutto il trattamento. Durante la durata di tutto il trattamento continuare a muovere le testine sulla pelle eseguendo dei movimenti circolari sul viso. Si consiglia di effettuare un ciclo di 20 trattamenti (tre-quattro trattamenti alla settimana), poi sospendere e riprendere con un nuovo ciclo dopo circa un mese.

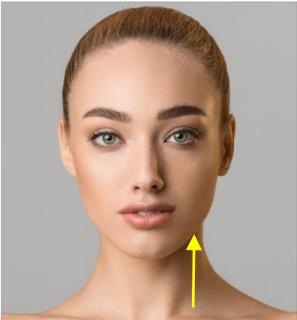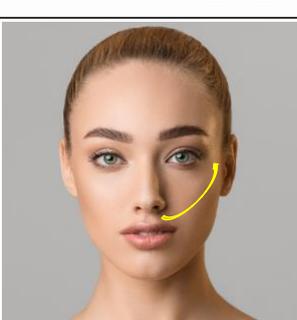	1) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dalla parte superiore della clavicola fino alla parte inferiore della mandibola (evitare la tiroide).
	2) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dalla parte bassa della mascella fino allo zigomo.
	3) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dall'angolo della bocca allo zigomo.
	4) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dal labbro superiore fino allo zigomo.



5) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dall'angolo del naso fino all'estremità dello zigomo (evitare le tempie).

(SRT) Ringiovanimento pelle per zona contorno occhi: 10 min. Importante: per la zona contorno occhi usare unicamente il programma SRT in quanto è l'unico a non emettere alcuna luce.



1) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dall'angolo interno dell'occhio fino a quello esterno e poi su verso il sopracciglio (evitare il bulbo oculare e la palpebra).



2) Far scorrere Globus RF Beauty Mini dalla parte esterna della palpebra fino all'attaccatura dei capelli passando accanto al sopracciglio.



3) Far scorrere Globus RF Beauty Mini su e giù più volte tra il sopracciglio e l'attaccatura dei capelli.

CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione come, ad esempio, alimentatori ecc...
- nessuna garanzia per accessori e materiali da considerarsi "di consumo" come ad esempio crema, ecc...

La presente garanzia è valida ed efficace nel paese dove il Prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi paese della Comunità Europea, la garanzia è comunque valida in tutti i suoi paesi.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:

1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali.
2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all'esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il rinnovo o l'estensione della stessa.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica
5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto, utilizzo di un alimentatore o caricabatterie non originale, eventi accidentali, alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei.
6. La garanzia non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

Le dimensioni, le caratteristiche riportate e le fotografie nel seguente manuale non sono vincolanti. Il produttore si riserva il diritto di approntare modifiche senza preavviso.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - Tel. (+39) 0438.7933

globuscorporation.com |   