



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINI DA VISITA MODELLO CLASSICO **CLASSIC EXAMINATION COUCHS** **LITS ACCOMPAGNANTS CLASSIQUES** **CAMILLAS CONSULTA CLÁSICA** **MARQUESAS DE CONSULTA CLÁSSICAS** **UNTERSUCHUNGSBETT KLASSISCHES** **ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ κλασικά**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF

27404 – 27405 – 27445

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



MD



PRODOTTI

- 27404 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso beige
- 27405 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso blu -schienale con foro
- 27445 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso albicocca

INTRODUZIONE

Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE

Il Lettino classico da visita è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunità, case di cura, studi medici. Lettino da visita con struttura e gambe interamente in acciaio cromato lucido. Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma. La parte schienale è completamente inclinabile.

COMPONENTI

- Materassino rivestito con tessuto lavabile ed ignifugo già fissato alla struttura cromata con alzatesta
- Bacchetta per alzatesta
- Gambe cromate
- Su richiesta: portalenzuolini cromato

Sacchetto con materiale di montaggio

- N. 4 TBE 8x16 (avvitate al telaio)
- BRUGOLA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Il lettino si fornisce parzialmente montato: il materassino è già agganciato al telaio della struttura.

Iniziare la fase di montaggio predisponendo un piano orizzontale di lavoro stabile.

Prendere il lettino e appoggiarlo su un piano di lavoro dal lato dell'imbottitura (materassino già fissato al telaio - **NON SVITARE**). Trovate in dotazione la chiave a brugola per svitare/riavvitare le gambe.




Svitare il tubolare dell'alzatesta tramite vite esagonale e relativo dado.





Dopo aver allentato le relative viti TBE 8x16, inserire le gambe dotate di traverso per alzatesta nell'alloggiamento del telaio fissato alla struttura e riavvitare sempre tramite la chiave a brugola in dotazione.

Procedere nello stesso modo con le gambe opposte del lettino.

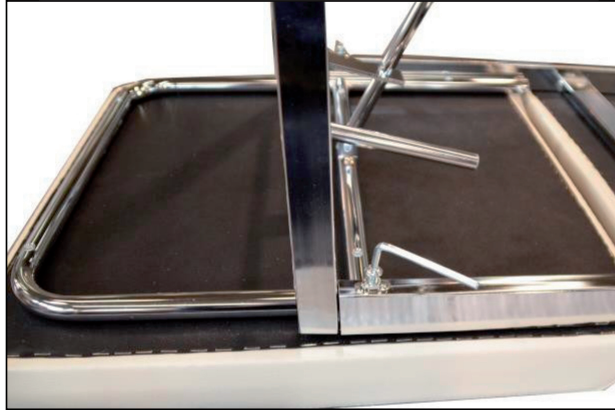

Inserire regolazione l'asta di regolazione dell'alzatesta nel suo alloggiamento (foro nella piattina).

Riavvitare tramite vite esagonale e relativo dado.

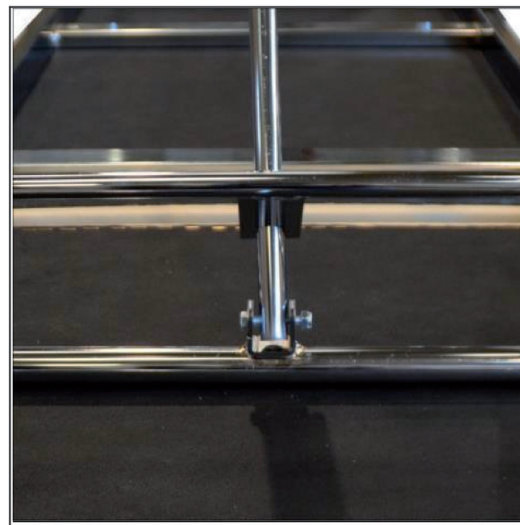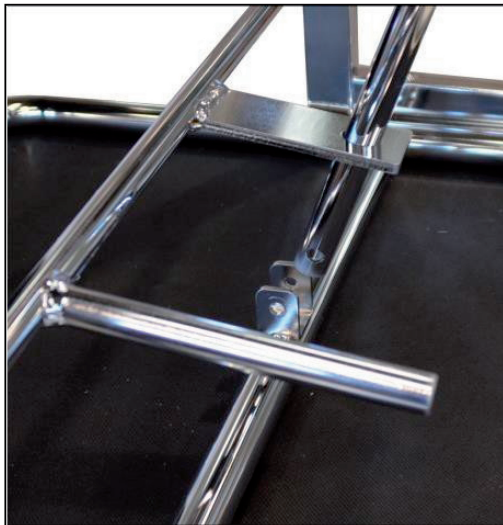

In dettaglio come si presenta l'alzatesta a montaggio ultimato.



SCHEDA TECNICA

| | |
|------------------------|---|
| Misure | cm.188 x 57,5 x h 73,5 scatola 198 x 17 x 64 h |
| Peso | 28 kg |
| Portata massima | 120 kg |

AVVERTENZE D'USO











- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.
- Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: **RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!**
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

INDICAZIONI DI PULIZIA PER IL TESSUTO:

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare. Attenzione: In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  | Conservare al riparo dalla luce solare |  | Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 |  | Conservare in luogo fresco ed asciutto |
|  | Codice prodotto |  | Leggere le istruzioni per l'uso |  | Fabbricante |
|  | Data di fabbricazione |  | Numero di lotto |  | Dispositivo medico |
|  | Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso | | | | |

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.