




# GIMA

## VENTOSA FETALE VACUUM FETAL VACUUM CUP

### MANUALE D'USO E MANUTENZIONE *USE AND MAINTENANCE BOOK*

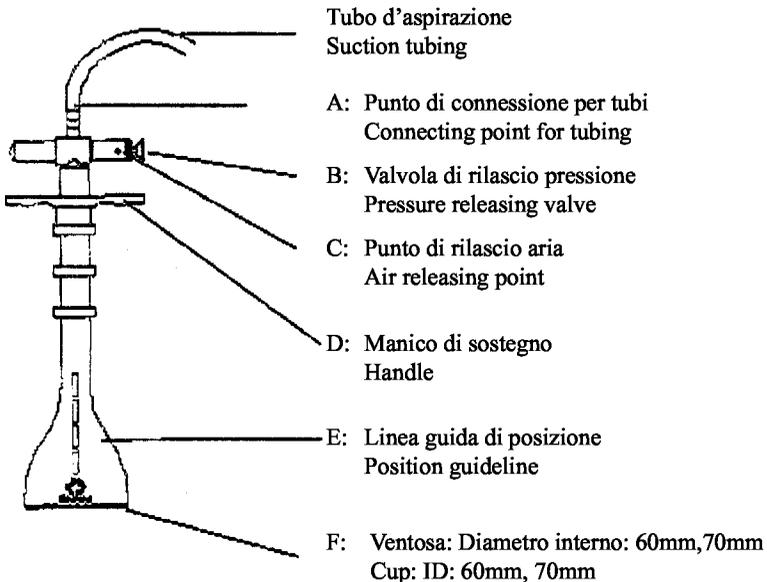

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*



**GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia**

**ITALIA: [gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)**

**INTERNATIONAL: [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com) - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)**



Besmed Health Business Corp. No.5, Lane 116, Wu-Kong 2nd rd.,  
Wu-Ku Industrial Park, Taipei, Taiwan



Mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71, 30855 Hannover-Langenhagen, Germany



## DESCRIZIONE

La ventosa fetale vacuum viene utilizzata per aiutare la nascita. Disponibile in 2 misure differenti: diametro interno 60mm e 70mm. Costruito in silicone per utilizzi medicali.

## MODALITA' D'USO

1. Allacciare il tubo ad entrambi i punti di aspirazione della macchina aspiratrice e al punto di connessione della ventosa di aspirazione (A).
2. Accendere la pompa di aspirazione.
3. Attaccare la ventosa (F) alla testa del feto. Una volta fissato, il feto verrà afferrato.
4. Premere la valvola di rilascio pressione (B) per rilasciare il feto.

## PRECAUZIONI



### **ATTENZIONE:**

1. *Le leggi federali limitano la vendita di questo dispositivo a medici o sotto prescrizione di un medico (solo USA).*
2. *Non utilizzare a lungo questo dispositivo dopo aver afferrato il bersaglio. Potrebbe provocare contusioni al feto.*
3. *Non applicarlo su aree vulnerabili, come occhi, bocca e tempie. Applicare unicamente su superfici con ossa.*
4. *Dopo aver afferrato la testa del feto, assicurarsi che la linea guida sia dritta mentre essa viene tirata. Non torcere la ventosa.*
5. *Il prodotto può essere sterilizzato in autoclave a 134°C per un massimo di 100 volte.*



## DESCRIPTION

Fetal Vacuum Cup is for birth assistance. Available for two sizes, 60 mm, and 70 mm ID. Made of medical grade silicone grade rubber.

## OPERATION INSTRUCTIONS

1. Connect the tubing to both the suction point of the suction machine and connecting point of the suction cup (A).
2. Turn on the suction pump.
3. Attach the cup (F) to the fetal head. The fetal head will be gripped once been attached.
4. Press pressure releasing valve (B) to release fetal head.

## CAUTIONS



### **CAUTION:**

1. *U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician (USA only).*
2. *Don't apply this device for a long time after gripping the target. It may cause bruise of fetal.*
3. *Don't apply it on vulnerable area, such as eyes, mouths, and temples. Only apply it on area with bones.*
4. *After gripping the fetal head, make sure the guideline is straight when pulling it. Don't twist the cup.*
5. *This product can be treated into a sterilizer at 134°C up to 100 times.*