

# Letto da visita ambulatoriale

Il letto da visita COREMEC, robusto e maneggevole, è la soluzione ideale per far accomodare e visitare i pazienti in comodità e sicurezza.

Il morbido foam rivestito in ecopelle garantisce al paziente una seduta confortevole. Foam ed ecopelle sono ignifughi classe 1 IM.


Non richiede di essere montato, arriva già pronto!

Basta aprire le gambe del letto, bloccarle con l'apposita leva e il letto è pronto all'uso.

Disponibile anche con foro facciale

## Principali caratteristiche tecniche

Portata	180 kg
Inclinazione schienale	19 possibili posizioni diverse, da minimo 0° a massimo 63° circa.
Movimentazione	Gambe pieghevoli (D), blocco tramite catenaccio con leva a doppia azione; schienale regolabile, due piedini regolabili.
Dimensioni ed ingombro	Chiuso: 187 x 56 x 17,5 cm Aperto: 187 x 56 x 78 cm  Sezione reclinabile L 68 cm – sezione fissa L 116 cm
Peso	27 kg
Confezionamento	Cartone con 1 pezzo pre-assemblato.
Colori	Verde, grigio, blu e nero

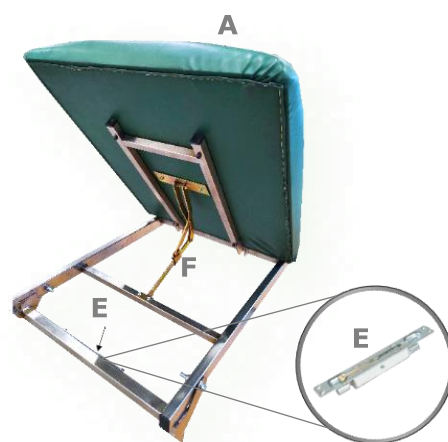

## Componenti

- A Schienale regolabile
- B Sezione fissa
- C Imbottitura
- D Gambe pieghevoli
- E Catenaccio con leva a doppia azione
- F Cremagliera
- G Portarotolo (accessorio)