



Serie
RUGY
MADE IN ITALY

Poltrone multifunzione

Ideali per ambienti
ambulatoriali ed ospedalieri



SKEMAFORM



Dispositivo Medico di Classe I
Conforme al nuovo regolamento MDR 2017/745 EU

Poltrona multifunzione serie Rugsy

Progettata e realizzata interamente in Italia, è il prodotto perfetto per essere inserito negli ambienti ambulatoriali ed ospedalieri, ideale per tutte le tipologie di trattamenti medici.

Grazie alla sua ergonomia si può ottenere una postura fisiologica ottimale del paziente, con imbottiture speciali che si adattano perfettamente alla conformazione fisica, con il duplice vantaggio di facilitare i diversi trattamenti terapeutici, garantendo sempre la massima comodità al paziente, nelle posizioni richieste dalle esigenze operative. È possibile adottare la posizione di **Trendelenburg** fino ad una inclinazione di 15°.

Le imbottiture hanno una forma avvolgente per massimizzare il confort della persona e sono realizzate in schiuma poliuretanicca ad alta densità e rivestite in **ecopelle ignifugo** lavabile.

La poltrona è dotata di **4 motori elettrici** a bassa tensione, gestiti da un'unica pulsantiera di comando per regolare altezza, inclinazione schienale, inclinazione gambale e angolo di Trendelenburg. La strumentazione elettrica della poltrona è interamente di tipologia medica, conforme agli standard di sicurezza da normativa IEC60601-1.

La poltrona è completa di **portarotolo** e porta telecomando, entrambi posti sulla parte posteriore dello schienale.

La base è dotata di **4 ruote piroettanti**, ciascuna con freno indipendente, che rendono molto agevole lo spostamento della poltrona, ed è coperta da un carter in tecnopolimero per proteggere da polveri e liquidi e garantire una facile sanificazione.

Tutte le poltrone Rugsy hanno una **portata di 200 Kg** e sono certificate come **dispositivo medico** ai sensi del Regolamento Europeo MDR 2017/745 EU.

Funzioni

Posizione di Trendelenburg



Movimento di elevazione



Inclinazione schienale e poggiatesta



Poltrona multifunzione *Rugy Visita - 3 sezioni*

RUGY
MADE IN ITALY



In dotazione



Telecomando e portatelecomando



Portarotolo colore bianco
(immagine a scopo illustrativo)



Poggiatesta

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

Densità 40 Kg/m³ - H: 5 cm

Rivestimento:

Ecopelle ignifugo lavabile

Angolo di regolazione:

Poggiagambe 0-107°

Schienale 0-85°

Trendelenburg 0-15°

DIMENSIONI E PESO

Ingombrò distesa: L 180 x P 88 cm

H seduta: 52 a 92 cm

Larghezza max seduta: 60 cm

 80 Kg

 200 kg

Colori Optional rivestimento senza supplemento*



#1944

#1816

#5947

#680



#41



#6



#991

Vedi pagina optional

* Disponibili in 10 gg lavorativi a partire dalla data dell'ordine

Poltrona multifunzione *Rugy Ginecologica - 3 sezioni*



Colori Optional rivestimento senza supplemento*



Vedi pagina optional

* Disponibili in 10 gg lavorativi a partire dalla data dell'ordine

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

Densità 40 Kg/m³ - H: 5 cm

Rivestimento:

Ecopelle ignifugo lavabile

Reggicosce: **PU**

Angolo di regolazione:

Poggiagambe 0-107°

Schienale 0-85°

Trendelenburg 0-15°

DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: **L 180 x P 88 cm**

H seduta: **52 a 92 cm**

Larghezza max seduta: **60 cm**

95 Kg

200 kg

RUGY
MADE IN ITALY

In dotazione



Telecomando e portatelecomando



Portarotolo colore bianco
(immagine a scopo illustrativo)



Poggiatesta



Vaschetta raccogli liquidi

In acciaio inox estraibile ed asportabile

Poltrona multifunzione *Rugy Prelievo - 3 sezioni*


PRELIEVO
INFUSIONE
DIALISI

RUGY
MADE IN ITALY

In dotazione



Telecomando e portatelecomando

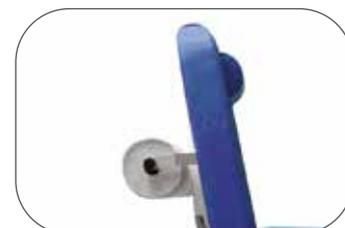

Portarotolo colore bianco
(immagine a scopo illustrativo)



Poggiatesta

Colori Optional rivestimento
senza supplemento*



Vedi pagina optional

* Disponibili in 10 gg lavorativi
a partire dalla data dell'ordine

Poggiatesta
integrato
imbottito

Disponibile

**IN PRONTA
CONSEGNA**

cod.PM140BLU
Colore **blu #5946**
con ruote

4 motori

Poggiabraccia
regolabili
manualmente
in altezza, in
inclinazione e
ruotabili a 360°

Rivestimento
Classe 1 IM
di resistenza
al fuoco

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

Densità 40 Kg/m³ - H: 5 cm

Rivestimento:

Ecopelle ignifugo lavabile

Poggiabraccia: PU

Angolo di regolazione:

Poggiagambe 0-107°

Schienale 0-85°

Trendelenburg 0-15°

DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: L 180 x P 78 cm


H seduta: 52 a 92 cm

Larghezza max seduta: 60 cm

 85 Kg

 200 kg

Accessori optional *con supplemento*

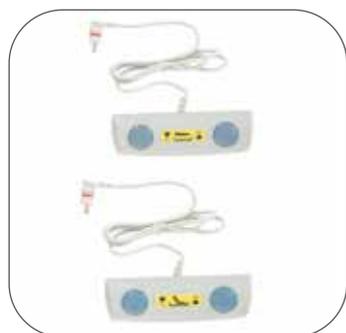

cod. PMA210

Kit 2 Comandi a pedale

Comando per alzatesta e comando per elevazione



cod. PMA200

Asta flebo

In alluminio anodizzato con 2 ganci in plastica (portata max. 2,5 Kg per gancio)

Colori Optional rivestimento* *senza supplemento*



TURCHESE #1944



VERDE LIME #1816



LILLA #5947



ROSSO #680



GIALLO #41



BIANCO #6



NERO #991

* Disponibili in 10 gg lavorativi a partire dalla data dell'ordine



www.morettispa.com



Seguici su