




Appoggiatesta orbitale.  
Orbital headrest.



Appoggiatesta imbottito.  
Padded headrest.



Appoggiatesta con protezioni  
parietali. - Headrest with parietal  
protections.

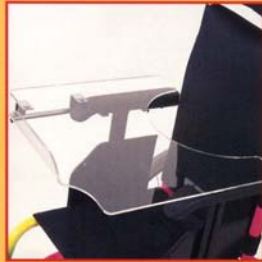

Tavolo in plexiglass.  
Plexiglass table.



Tavolo in plastica.  
Plastic table.



Tavolo ribaltabile (sia in plexiglass  
che in plastica). - Tilting table (either  
in plexiglass or in plastic).



Spinte laterali e braccioli regolabili in altezza.  
Side pushers and armrests adjusted in height.



Minimo ingombro.  
Minimum bulk.

COLORI STANDARD  
STANDARD COLORS

Blu metallizzato  
Metalized blue



Rosso metallizzato  
Metalized red



Multicolor  
Multicolor



▪ **Contattateci per qualsiasi richiesta.** ▪ **Per l'ordinazione della carrozzina vedere la scheda d'ordine.**  
▪ **Contact us for all your needs.** ▪ **Consult the specific order form to place wheelchair orders.**

30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44	49 - 51 53 - 55 57 - 59 61 - 63	A richiesta On request	A richiesta On request	Gradi basculamento Balancing degrees 24°	Gradi schienale reclinabile Reclining backrest deg. 30°	43 - 45 47 - 49 51 - 53 55 - 57	A = 63 D = 82	102	15


**OFF CARR®**

associato  
**Areha**

I 35010 Villa del Conte (Padova) Italy - Via Vittorio Veneto, 7  
Tel. ++39 (049) 93 90 122 • Fax. ++39 (049) 93 90 133  
http://www.offcarr.com • E-mail: offcarr@offcarr.com

**OFF CARR®**

**ANTARES**

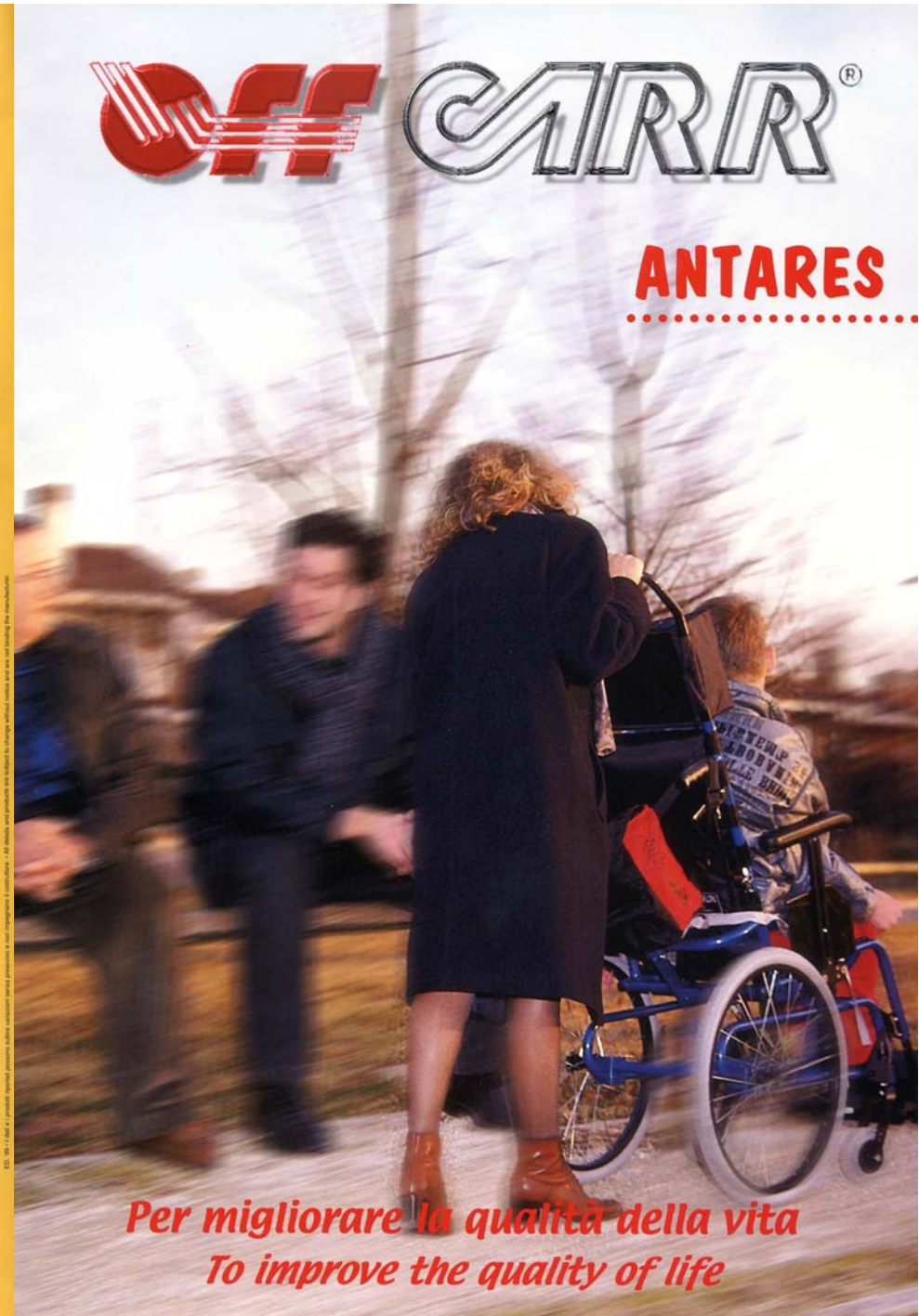

**Per migliorare la qualità della vita  
To improve the quality of life**



# ANTARES

BASCULANTE CON PEDANA ELEVABILE E SCHIENALE RECLINABILE

BALANCING SYSTEM WITH LIFTING FOOTREST AND RECLINING BACKREST

ANTARES è appositamente studiata per chi è affetto da gravi limitazioni funzionali. È una carrozzina in lega leggera, basculante che da all'utilizzatore la possibilità di variare l'inclinazione della posizione di seduta. A scelta può avere lo schienale reclinabile, la pedana unica elevabile, il sedile e lo schienale anatomico rigido imbottito. Tutte le tecnologie affiancate all'ANTARES permettono di migliorare enormemente la qualità della vita del soggetto e la sua gestibilità.

ANTARES is specifically designed for persons with severe functional limits. These are light alloy wheelchairs with a balancing system so that users can modify their sitting positions. They can be selected with reclining backs, one-piece lifting footrests, rigid padded anatomic seats and backrests. The technology that backs up ANTARES will greatly improve the quality of life and manageability of the person using it.



Regolazione asse per ricercare la giusta stabilità.  
Axial adjustment to find correct stability.

Pistoni a gas per schienale reclinabile e basculamento carrozzina.  
Gas pistons for reclining backrest and balancing the wheelchair.



Variazione manuale dell'inclinazione.  
Manual adjustment of the inclination.

# ANTARES

BASCULANTE IMBOTTITA CON PEDANA ELEVABILE E SCHIENALE RECLINABILE

PADDED AND ROCKING WITH LIFTING FOOTREST AND RECLINING BACKREST

# ANTARES

BASCULANTE

BALANCING SYSTEM



Pedana elevabile.  
Lifting footrest.

Inclinazione massima sedile: 24°.  
Inclinazione massima schienale: 30°.  
Maximum seat inclination: 24°.  
Maximum back inclination: 30°.



