

1 VALVOLA		2 VALVOLE	
Altezza 6 cm	Altezza 10 cm	Altezza 6 cm	Altezza 10 cm
CA-4040-16 40 x 40 cm	CA-4040-110 40 x 40 cm	CA-4040-26 40 x 40 cm	CA-4040-210 40 x 40 cm
CA-4540-16 45 x 40 cm	CA-4540-110 45 x 40 cm	CA-4540-26 45 x 40 cm	CA-4540-210 45 x 40 cm
CA-4545-16 45 x 45 cm	CA-4545-110 45 x 45 cm	CA-4545-26 45 x 45 cm	CA-4545-210 45 x 45 cm
CA-5045-16 50 X 45 cm	CA-5045-110 50 x 45 cm	CA-5045-26 50 X 45 cm	CA-5045-210 50 x 45 cm

Descrizione

Cuscini realizzati in PVC e gomma composti da celle interconnesse gonfiate ad aria. Disponibili nelle altezze di sei e dieci centimetri e nelle versioni ad una o due valvole. Fodera traspirante con base antiscivolo e fissaggi a velcro. La confezione include, quale dotazione standard, una fodera di ricambio, la pompa di gonfiaggio ed un kit di riparazione.

Indicazioni

Cuscini antidecubito realizzati per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta. I cuscini contribuiscono al mantenimento della postura corretta e concorrono alla prevenzione delle lesioni da decubito. Per pazienti ad alto rischio con peso non superiore a 150 kg.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto impiego è necessario attenersi alle semplici operazioni riportate nel libretto delle istruzioni contenuto in ogni confezione. Sebbene il cuscino sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Materiali componenti

Cuscino: PVC e gomma.
Fodera: PVC 70% e Dacron 30% con base antiscivolo Dacron 100%.

Pulizia

Cuscino: pulire con panno morbido e detergenti neutri. Risciacquare sotto acqua corrente. Non immergere. Non lavare in lavatrice. Asciugare all'aria aperta.
Fodera: lavare con ciclo normale ad una temperatura massima di 30 °C. Non stirare. Non lavare a secco. Non candeggiare. Non asciugare nell'asciugatrice.
Per motivi di igiene, si raccomanda di utilizzare il cuscino con un solo paziente.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

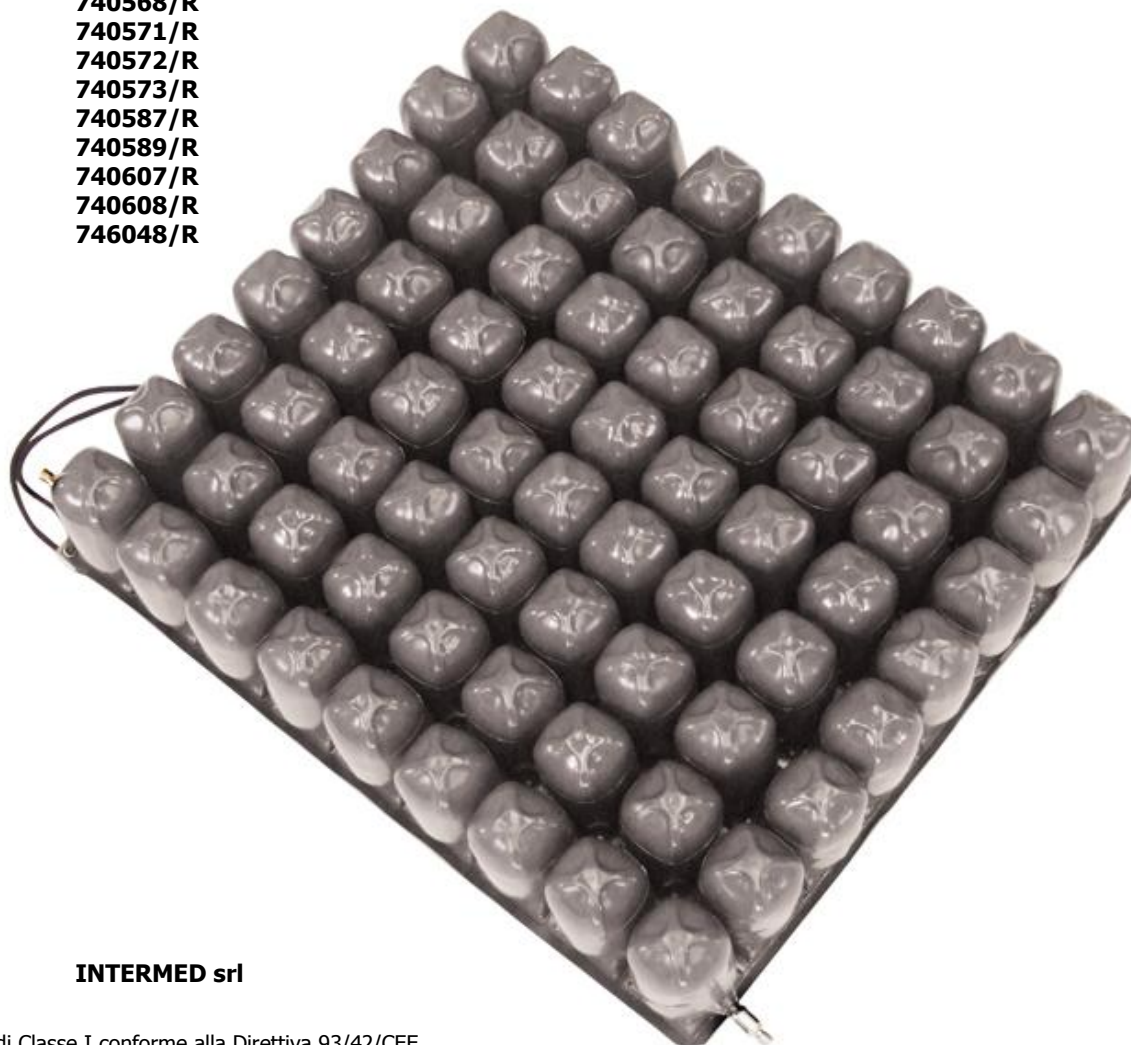
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione Singola

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND Y033303**Numeri di repertorio**

CA-4040-16	740408/R
CA-4540-16	740508/R
CA-4545-16	740527/R
CA-5045-16	740529/R
CA-4040-110	740531/R
CA-4540-110	740547/R
CA-4545-110	740567/R
CA-5045-110	740568/R
CA-4040-26	740571/R
CA-4540-26	740572/R
CA-4545-26	740573/R
CA-5045-26	740587/R
CA-4040-210	740589/R
CA-4540-210	740607/R
CA-4545-210	740608/R
CA-5045-210	746048/R

**Produttore** INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE