

## IMMOBILIZZATORE DEL POLSO

### Art. 033

Tutore di supporto, protezione e immobilizzo del polso dotato di 3 aste anatomiche, modellabili, inserite nella base, per garantire il blocco completo dell'articolazione. Le aste sono anatomiche, modellabili a freddo, per adattare alle esigenze individuali.



### Indicazioni

- Patologie Traumatiche: distorsioni-fratture distali del radio-tendiniti.
- Patologie Degenerative: rizoartrosi-sindrome del tunnel carpale-osteoartrosi-artrosi-artrite guttosa acuta-artrite reumatoidea.
- Fase Riabilitativa: scarico del muscolo tendineo post-trauma e post-operazione.

### Caratteristiche

Avanzato sistema di doppia chiusura brevettato da Pavis. Con la prima asola si effettua, la prima chiusura attorno al polso, con i tiranti supplementari si perfeziona la stessa e si personalizza la tensione desiderata per ottenere il massimo comfort. Colore blu.

### Benefici


AMBIDESTRO. Completamente apribile, permette un'applicazione facile ed indolore. NON CONTIENE NEOPRENE.

### Componenti specifici

Lo strato a contatto con la pelle è costituito da un velluto di cotone 100%, confortevole al tatto, che garantisce alla pelle libera traspirazione. Lo strato esterno è costituito da una maglia di nylon resistente sulla quale aderiscono perfettamente le bande di velcro utilizzate per il sistema di chiusura.



100% COTONE SULLA PELLE

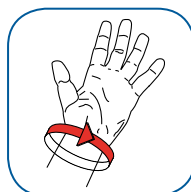

**New EDGE<sup>®</sup>**  
LINE

Size	SMALL	REG	EXTRA
Circonferenza del polso (ambidestro) CM	13.5-16	16-18.5	18.5-21