

**Nome Prodotto**

Materasso a Cessione d'Aria Medica 3.

Destinazione d'uso

Il materasso Medica 3 viene abbinato al compressore Viking 609 (codice 05.03.HF609). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo del paziente. Grazie alla struttura degli elementi a livello sacrale, si va a creare in maniera attiva un microcircolo dell'aria diretto verso il corpo dell'assistito.

**Caratteristiche**

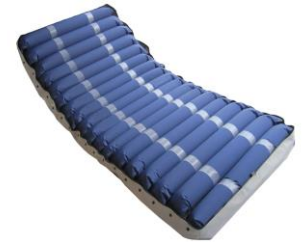
Codice	05.03.HF6006
Materiale Elementi Intercambiabili	Nylon / PU
Numero Elementi	18
Altezza Elementi	12 cm
Base	Espanso Ignifugo Spesso 5 cm (classe 1IM)
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 80 x 17 cm
Portata Terapeutica	200 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
Connettore TRANSPORT, permette di mantenere il materasso gonfio per 12 h senza l'uso del compressore	
Cinghie alle estremità per il fissaggio al letto	
Fodera in poliuretano ignifugo con cerniera a 360° su 4 lati	
Valvola CPR di sgonfiaggio rapido	
Tre elementi a livello del capo statici	
Optional: larghezza 90 cm	
Manutenzione e Pulizia Fodera	
Lavaggio Max 95° C	Non Stirare
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.018
Codice CND	Y033306
Codice RDM	1389146/R



Product Name

Air Mattress Medica 3.

Use

The mattress Medica 3 is combined with the Viking 609 pump (code 05.03.HF609). The combination of mattress and pump creates a medical device able to guarantee a low contact pressure on the whole body of the patient. A microcirculation of the air directed towards the body of the patient is actively create, thanks to the structure of the elements in the sacral area.



Features	
Code	05.03.HF6006
Interchangeable Elements Material	Nylon / PU
Number of Cells	18
Cells Height	12 cm
Base	Fireproof foam base 5 cm thick (class 1IM)
Dimensions Inflated	200 x 80 x 17 cm
Therapeutic Capacity	200 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)
TRANSPORT connector: allows to keep the air in the mattress for 12 hours without the pump working	
Straps at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Polyurethane with 360° zip on 4 sides	
CPR valve for quick deflation	
First three elements always inflated	
Optional: width 90 cm	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Water temperature not above 95° C	 Do not iron
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.018
CND Code	Y033306
RDM code	1389146/R