


# MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC

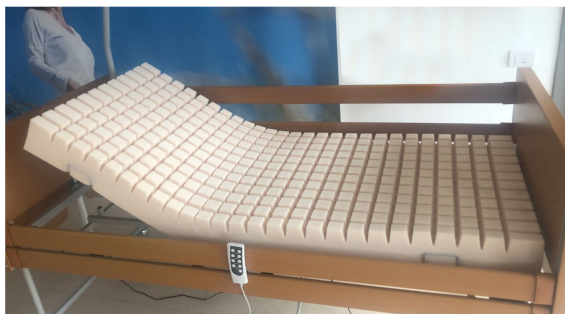

## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Il materasso 30MC è un dispositivo medico destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

Prodotto in schiuma poliuretanic micro cellulare a cellula aperta di tipo convenzionale, con lavorazione scarichi tronco piramidali, senza l'impiego di C.F.C.

Non contiene lattice ed è stato trattato per ostacolare la formazione di batteri, microbi, acari e muffe. Protezione chimica agli odori assicurata.

Perfetta stabilità e adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione; ottima riduzione delle pressioni di contatto ed elevato comfort per il paziente.

## DESTINAZIONE D'USO

Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
94003000	MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC	2081593	Y033306

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I
--------------------------------------	---

## MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Dimensioni reali materasso</b>	193x83x14 cm Materasso idoneo per rete 90x200 cm
<b>Peso</b>	5,7 Kg
<b>Portata massima</b>	150 Kg
<b>Materiale/Densità della Base in Poliuretano</b>	Poliuretano espanso - 30 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Materiale del materasso</b>	Mescola pressofusa di poliuretano espanso ad alta densità (30 Kg/m <sup>3</sup> ) e alta resilienza
<b>Portata Terapeutica</b>	150 Kg
<b>Pulizia / Disinfezione</b>	Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria, senza esposizione diretta ai raggi solari. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo.
<b>C.F.C.</b>	Completamente assente
<b>Lattice</b>	Free



## MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC

### SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA

#### Smaltimento

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.