

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 20.02.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CL200	Carrozzina superleggera ATMOS
-------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile. Seduta regolabile in profondità. Schienale tensionabile a 5 punti. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere pneumatiche e corrimano in alluminio verniciato. Ruote anteriori con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Freno di stazionamento. Fiancata protegge abiti. Pedana unica ribaltabile. Cinturino ferma polpacci.

Immagine prodotto

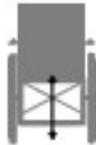
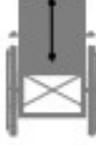
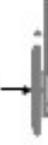


RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND	Y122106
Numero RDM	1876436
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.060
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.012

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	<i>Alluminio</i>
Seduta	<i>Nylon</i>
Ruote anteriori	<i>PU</i>
Ruote posteriori	<i>Pneumatiche</i>
Freni	<i>Alluminio</i>
VARIANTI	
CL200B-xx – Struttura bianca	CL200N-xx – Struttura nera
CL200R-xx – Struttura rossa	
Misure disponibili 38 – 40 – 42 – 44 – 46 Cm	
DIMENSIONI	
Misure in CM	     
CL200*-38	
CL200*-40	
	38 40 Fronte 50-55
ACCESSORI OPZIONALI	
CLA210	BRACCIOLI RIBALTABILI
CLA211	PEDANE SEPARATE
CLA212	PEDANA INTERA
CLA215	RUOTE ANTERIORI 10CM
CLA216	RUOTE ANTERIORI 15CM
CLA217	RUOTE ANTERIORI 17,5CM
CLA220	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
CLA221	RUOTINE PASSAGGI STRETTI
CLA230	RUOTE POSTERIORI PIENE 24"
CLA231	RUOTE POSTERIORI PNEUMATICI 24"
CLA232	ANELLI AUTOSPINTA SUPERGRIP
CLA240	MANIGLIE POSTERIORI REGOLABILI
CLA241	FRENI RADIALI
CLA242	KIT VARIAZIONE SEDUTA
CLA243	KIT POGGIATESTA
CLA244	KIT PROLUNGA SCHIENALE
CLA245	CINTURINI FERMA PIEDI
CLA250P	KIT RUOTE IN COLORE