

PRESSCARE G300M

PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DISPOSITIVO MEDICO ADATTO PER ESIGENZE DI SALUTE, BENESSERE, ESTETICA E RELAX. INDICATO PER LINFEDIEMI, PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE VENOSA, PESANTEZZA ALLE GAMBE, EDEMI, ARTI GONFI, LINFODRENAGGIO, RITENZIONE IDRICA, CELLULITE, MASSAGGI EMATOMI, STASI VENOSA. PUÒ ESSERE INOLTRE USATO CON TRE ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DELL'UTILIZZO.

SPECIFICHE TECNICHE

Uscite
2
Programmi
3
Pressione
0-180mmHg \pm 10%
Timer
fino a 99 minuti
Alimentazione a rete
230V AC, 50Hz
Dimensioni
mm 185x180x230
Peso
gr 3000

DOTAZIONE DI SERIE




- Secondo il tipo di configurazione
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

CONFIGURAZIONI DI ACQUISTO

	GAMBALI	BRACCIALI	FASCIA ADDOMINALE	CAVO SDOPPIATORE
· PRESSCARE G300M-1	1	/	/	/
· PRESSCARE G300M-2	2	/	/	/
· PRESSCARE G300M-3	2	/	1	1
· PRESSCARE G300M-1B	/	1	/	/



CE
0598

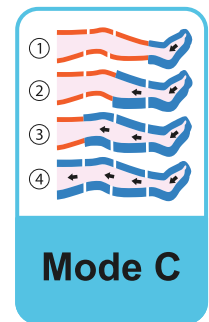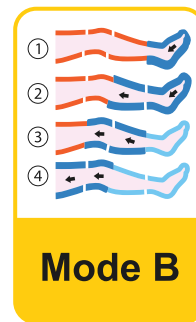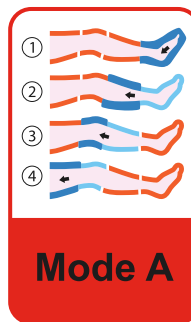

MODE A: la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più proximale.

MODE B: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte.

MODE C: la sequenza del programma effettua la pressione partendo dal piede e mantenendo gonfie le camere precedenti fino a gonfiare l'intera parte (gamba, braccio o addome).


PRESSCARE G300M

PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO


DIMENSIONE ACCESSORI (4 SEZIONI)

Rev. It_08_2019


GAMBALI TAGLIA "S" (A x B) (A) mm 927 x (B) mm 310

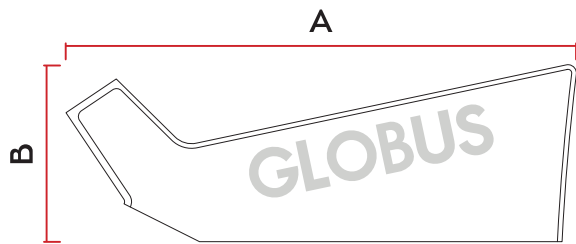


GAMBALI TAGLIA "M" (A x B) (A) mm 1001 x (B) mm 355

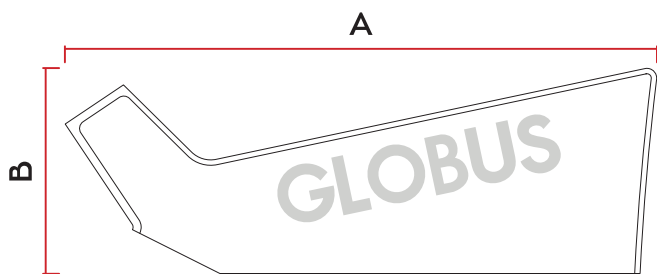


GAMBALI TAGLIA "L" (A x B)* (A) mm 1188 x (B) mm 380

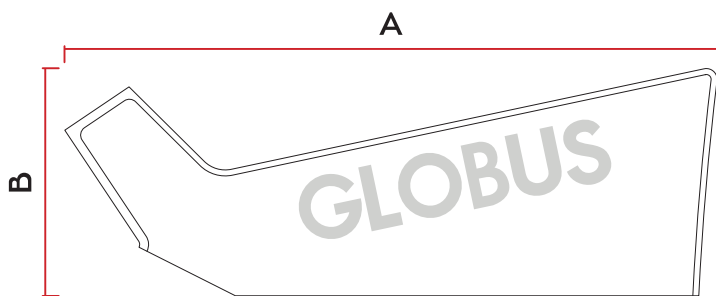

* FASCIA ADDOMINALE (A x B) (A) mm 1330 x (B) mm 380

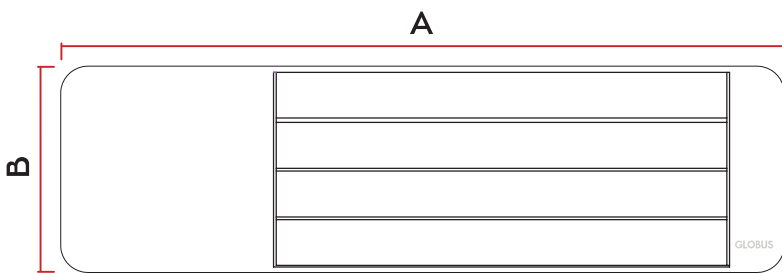

* BRACCIALE (A x B) (A) mm 296 x (B) mm 879

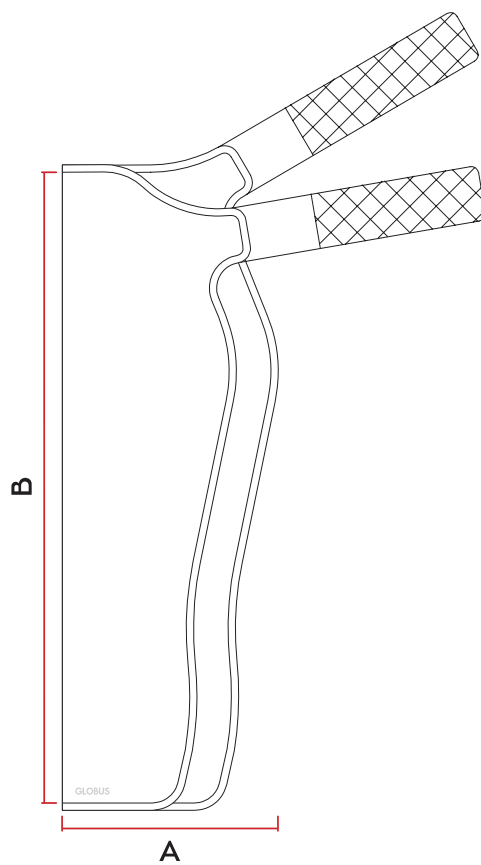

CAVO SDOPPIATORE per utilizzare tre accessori contemporaneamente

CAVO SINGOLO

Gli accessori, a seconda del tipo di configurazione, possono essere opzionali o in dotazione.

* ESTENSORE BRACCIALE larghezza mm 100

* ESTENSORE GAMBALE larghezza mm 100

* Accessorio opzionale disponibile su richiesta