

GENESY 600

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 149 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE A QUATTRO CANALI PER UTENTI ESIGENTI E PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE.

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 DOLORE | 12 MICROCORRENTI | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB
7 ACTION NOW | 3 DENERVATO | 1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35


Peso

gr 454


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 600
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo

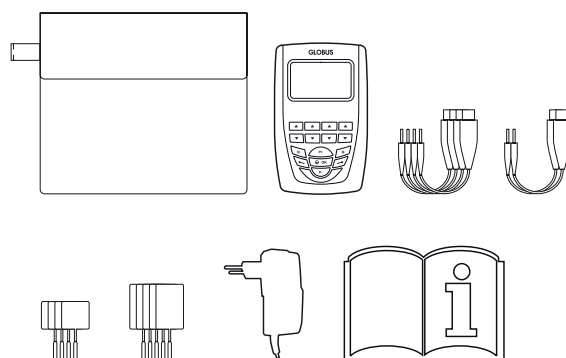

CE
0476

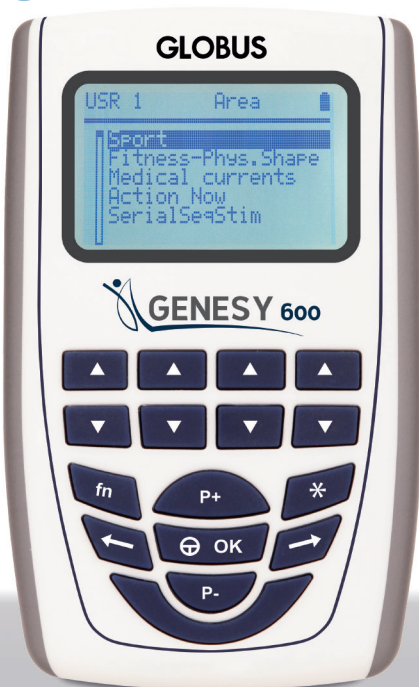

TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCRIO STIM



WORK TIME



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 600

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 149 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

REHAB

Caviglie gonfie

Atrofia

Emiplegia-arti superiori

Emiplegia-arti inferiori

Recupero post intervento LCA

Recupero funzionale

Rieducazione caviglia

Rieducazione gamba

Spasmi muscolari

Prevenzione sublussazione spalla

Rinforzo vasto mediale

Agonista/Antagonista

Penna cercapunti

Rinforzo muscolare

DOLORE

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

Tens antalgica bassa frequenza

Tens endorfinica

Dolore ginocchio

Dolori mestruali

Dolore post intervento

Dolore cronico

Dolore alla spalla (sindrome scapolo-omerale)

Tunnel carpale

Dolore trapezio

Infiammazione cuffia rotatori

Dolore muscolare

Sciatalgia

Lombalgia cronica

Dolore cervicale

Borsiti-tendiniti

Fratture ossee

Epicondilita

Osteoartrite

IONOFRESI

Ionoforesi

INCONTINENZA

Incontinenza mista

MICROCORRENTI

Epicondilita

Periartrite scapolo-omerale

Contusione

Sciatalgia

Lombalgia

Dolore acuto

Dolore articolare

Torcicollo

Colpo di frusta

Distorsione spalla

Distorsione ginocchio

Infiammazione tendinea

DENERVATO

Triangolare (livello di denervazione basso)

Trapezoidale (livello di denervazione medio)

Rettangolare (livello di denervazione alto)

SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Recupero attivo

Forza massima

Forza resistente

Forza esplosiva

Resistenza aerobica

Reattività

Recupero post-gara

Decontratturante

Ipertrofia

FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento Massa

Body Sculpting

Definizione

Jogging

Fitness Anaerobico

Fitness Aerobico

Prevenzione crampi

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 12 combinazioni di parametri.

I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2.

La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 7 combinazioni di parametri.

I programmi "Action Now" sono particolarmente utili per poter associare e sincronizzare la stimolazione elettrica con un'azione volontaria.