

PRESSCARE G-SPORT³

PRESSOTERAPIA | 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO


DISPOSITIVO PER COMPRESSIONE PNEUMATICA RIVOLTO AGLI SPORTIVI, REALIZZATO PER VELOCIZZARE IL RECUPERO MUSCOLARE E LA STANCHEZZA POST ALLENAMENTO E GARA. LEGGERA E TRASPORTABILE OVUNQUE, IL POWER BANK DI CUI È DOTATA PERMETTE DI ESEGUIRE UN TRATTAMENTO ANCHE SUBITO DOPO UNA GARA, DIRETTAMENTE A BORDO CAMPO.

SPECIFICHE TECNICHE

Uscite
2
Programmi
3
Pressione
0-180mmHg ±10%
Timer
fino a 99 minuti
Alimentazione
- Rete, 100-240V AC, 50-60Hz - Batteria ricaricabile (Power Bank)
Dimensioni
mm 180x190x135
Peso
gr 1118

DOTAZIONE DI SERIE

· 1 Borsa
· 1 Unità motore G-SPORT ³
· 2 Gambali taglia "S" o "M" o "L"
· 2 Cavi collegamento
· 1 Alimentatore
· 1 Power Bank
· 1 Manuale operativo

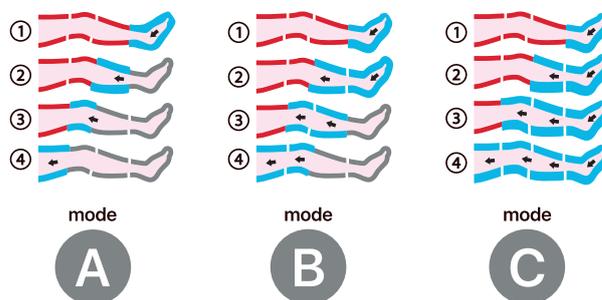

MODE A: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del gambale un settore per volta, per effettuare un massaggio attivante, ideale prima della gara o dell'allenamento.

MODE B: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio e lo sgonfiaggio di due camere per volta, per evitare il reflusso di fluidi verso il basso e rendere il trattamento efficace e molto confortevole.

MODE C: la sequenza del programma prevede il gonfiaggio sequenziale di tutte le camere e poi sgonfiaggio simultaneo, ideale per un massaggio più profondo.




PRESSCARE G-SPORT³


PRESSOTERAPIA | 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DIMENSIONE ACCESSORI (4 SEZIONI)


GAMBALI TAGLIA "S" (A x B) | (A) mm 745 x (B) mm 310

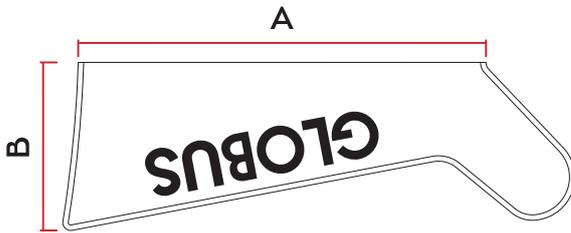


GAMBALI TAGLIA "M" (A x B) | (A) mm 880 x (B) mm 352

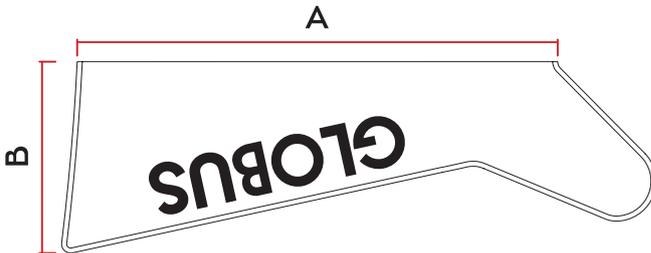

* GAMBALI TAGLIA "L" (A x B) | (A) mm 980 x (B) mm 380

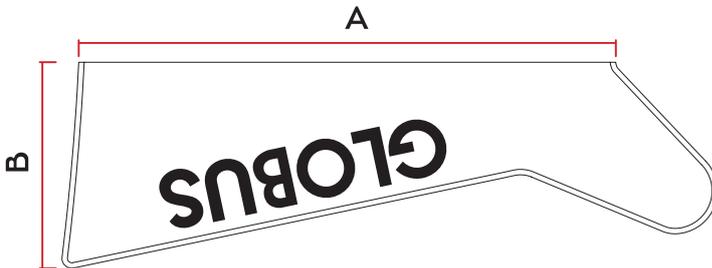


FASCIA ADDOMINALE (A x B) | (A) mm 1330 x (B) mm 380

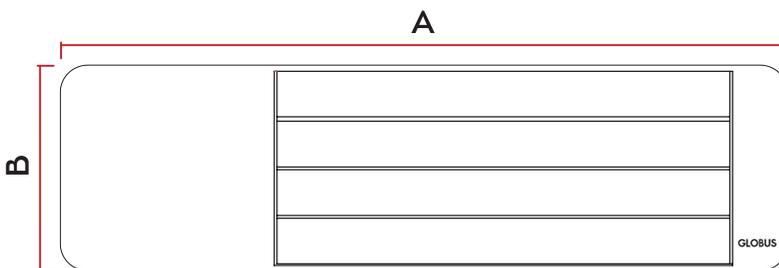

* ESTENSORE BRACCIALE | larghezza mm 100

* ESTENSORE GAMBALE | larghezza mm 100

* BRACCIALE (A x B) | (A) mm 440 x (B) mm 1287

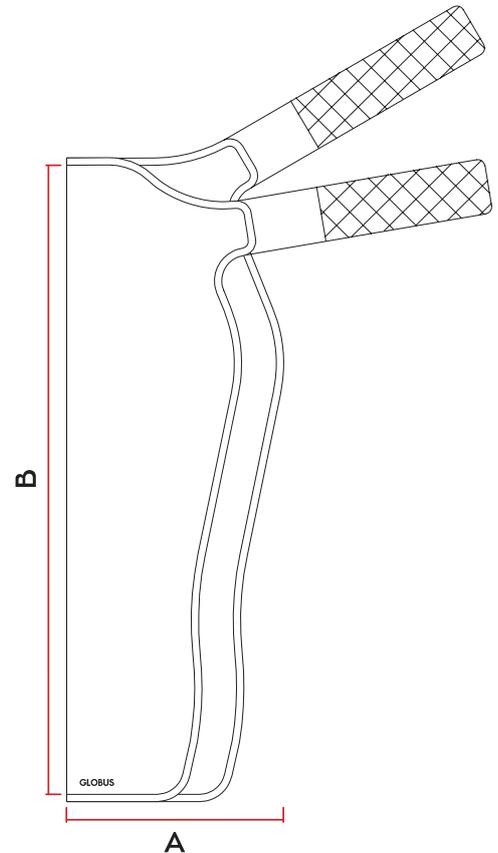

* Accessorio opzionale disponibile su richiesta