

Nome Prodotto

Sollevatore Passivo Lifty 4 E.

Codice	Portata (Kg)
01.01.LIFTY4E	200

Destinazione d'uso

I sollevatori passivi permettono il sollevamento da letto/carrozzina/barella di pazienti con importanti limitazioni funzionali.

Descrizione

Il sollevatore elettrico passivo **LIFTY 4 E** è dotato di una centralina LINAK (asportabile su richiesta) collocata sulla colonna portante, telecomando con cavo elettrico, bilancino a 4 punti di aggancio con sistema di sicurezza, maniglione per facilitare lo spostamento, base con 4 ruote pivotanti di cui 2 con freni d'arresto, un pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità, un sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità e un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando.

Un sistema elettrico aziona l'apertura e la chiusura della base.



Codice	Lunghezza	Larghezza	Larghezza Interna Base	Larghezza Esterna Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Altezza Base	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.LIFTY4E	132.5	65	52/90	65/104	66	171	9/13	7.5 (3")	10 (4")	200	40	136x67x43

Gruppo Elettrico

LINAK	24 V
-------	------

Materiali

Telaio	Acciaio
--------	---------

Manutenzione e Pulizia

La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica

Conservazione e Smaltimento

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virgilio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	Y123603
Codice RDM	1792323/R

Product Name

Passive Lift Lifty 4 E.

Code	Capacity (Kg)
01.01.LIFTY4E	200


Use

The passive lifts allow the lifting from bed / wheelchair / stretcher of patients with important functional limitations.

Description

The LIFTY 4 E is equipped with a LINAK control unit (removable on request) placed on the mast, hand remote control, 4 anchor points sling bar with safety system, handle for moving, base with 4 rotating wheels, 2 of which have braking rest, an emergency stop red button that blocks the flow of electricity, a mechanical safety lowering in case of black out and an additional electric safety lowering system in case of malfunction of the remote control. An electric system opens and closes the base.

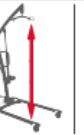

Code	Length	Width	Internal Base Width	External Base Width	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Base Height	Front Wheels	Rear Wheels	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.LIFTY4E	132.5	65	52/90	65/104	66	171	9/13	7.5 (3")	10 (4")	200	40	136x67x43

Electrical Group

LINAK 24 V

Materials

Frame Steel

Maintenance and Cleaning

Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging

Storage and Disposal

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box 1 Piece

Warranty

European 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References

Manufacturer Demarta Virgilio S.a.S.

Directive 93/42 Class I

ISO Code 12.36.03.006

CND Code Y123603

RDM Code 1792323/R