

LASERVET 1.0

LASERTERAPIA

LASERVET 1.0 È L'UNICO LASER IN CLASSE 3B DEL CATALOGO GLOBUSVET. IL DISPOSITIVO PUÒ RAGGIUNGERE 1 WATT DI POTENZA ED È COMPLETO DI PROGRAMMI PREINSERITI PER CANI, GATTI E CAVALLI. INOLTRE C'È LA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE E MEMORIZZARE NUOVI PROGRAMMI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 3B

Potenza di picco

1W \pm 20%

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Pulsata e continua

Dimensioni target area

Ottica da mm 11

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

Rete e batteria ricaricabile

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso

gr 440

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 1.0
- 1 Manipolo laser 808nm con ottica da mm 11
- 2 Occhiali protettivi
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo

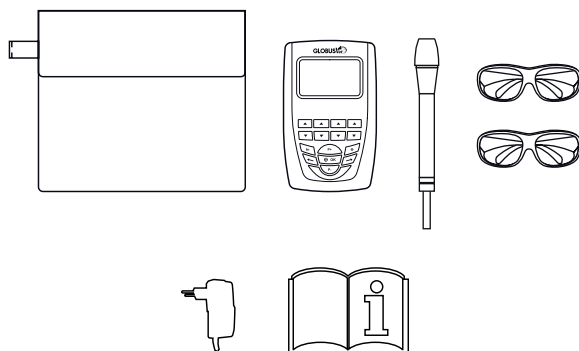

CE



-  LAST 10
-  MULTI USER
-  PROGRAMMABILE
-  OPZIONE NOLEGGIO
-  PACCO BATTERIA
-  ALIMENTAZIONE A RETE

LASERVET 1.0

LASERTERAPIA

**PIÙ DI 40 PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER CANI, GATTI, CAVALLI.
I TRATTAMENTI INCLUDONO PROTOCOLLI PER:**

Patologie muscolo-scheletriche come artrosi, tendinopatie, contusioni, borsiti, contratture e stiramenti muscolari ecc...

Patologie dell'apparato tegumentario come ferite superficiali e profonde

Patologie di altri apparati come otiti, sinusiti, stomatiti ecc...

