

Hand-bikes

by **CARR**

EASYBIKE

L'uniciclo modello EASYBIKE è una bicicletta facile da usare che in pochi secondi può essere applicata autonomamente a qualsiasi carrozzina grazie ad un fissaggio appositamente studiato.

EASYBIKE è un ausilio indispensabile per persone attive e grazie al suo ridotto ingombro, può essere facilmente trasportato in auto. Disponibile anche nella versione da bambino.



FRANCESCO VALENTINI



EASYBIKE 8F KID



EASYBIKE 8CR



EASYBIKE 27



Applicazione
dell' Easybike ad una
carrozzina

Hand-bikes

Caratteristiche tecniche

- Telaio in acciaio.
- Ruota anteriore da 24" con copertura ad alta pressione.
- Braccetti di fissaggio regolabili in larghezza ed inclinazione.
- Cavalletto regolabile.
- Fanalino anteriore e segnalatore acustico.



Manopola di spinta per tetraplegici



Fanalino anteriore

EASYBIKE 8CR

Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti interni, e freno a contropedale. Disponibile anche da bambino.

EASYBIKE 8F

Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva. Disponibile anche da bambino.

EASYBIKE 27

Cambio a 27 rapporti esterni e doppio freno con comando sulle manopole.



Ciclo computer

Per ragioni di sicurezza l'uniciclo Easybike può essere applicato solo su carrozzine con pedane non estraibili.



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
 Numero d'ordine: _____
 Rif. Utente: _____
 Note: _____

EASYBIKE

Scheda d'ordine


- EASYBIKE KID 8F
- EASYBIKE KID 8CR
- EASYBIKE 27
- EASYBIKE 8CR
- EASYBIKE 8F

-Modello carrozzina su cui applicare l'Easybike :

-Larghezza esterna dei tubi anteriori del telaio : (L) cm


-Altezza utilizzatore: cm

- Colore telaio: grigio metallizzato blu metallizzato
- nero brillante

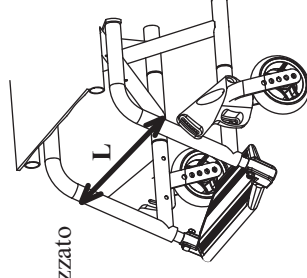

NOTE PER L'APPLICAZIONE

Per trovare la giusta inclinazione dell'Easybike, i braccetti devono essere regolati in modo simmetrico e si deve usare come riferimento il segno sul dente (A) rispetto all'incavo (B). Inoltre si consiglia di regolare l'Easybike, applicata alla carrozzina, con le manopole che distino, in rotazione, 5 cm dalle gambe e 15 cm dal petto.

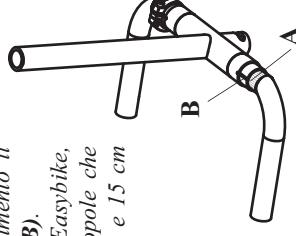

Optional

- Ciclo computer con fili:
- Specchietto retrovisore:
- Manopole per tetraplegici:

Colore diverso dallo standard:
 (vedere catalogo "Colori")